



XCALIBER STERILE KITS



Kit stérile prêt à l'emploi



Fixateur XCaliber articulé de cheville | Fixateur XCaliber méta-diaphysaire



VOTRE KIT STÉRILE... COMPLET POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ D'EMPLOI

Fait d'un matériau plastique composite innovant, le fixateur XCaliber est aussi solide que les fixateurs conventionnels tout en étant beaucoup plus léger. Cela signifie qu'il est plus facile à manipuler, plus facile à appliquer, et plus confortable pour le patient.

Entièrement radiotransparent, ce qui permet un contrôle aisé du foyer de fracture lors de la réduction.

Moins d'exposition au rayonnement pour l'équipe chirurgicale.

Plus de facilité en post-opératoire lors du contrôle de la formation du cal et de la consolidation osseuse.

Usage unique - aucun frais de maintenance ni de stérilisation et une traçabilité du produit.

Instrumentation minimale: moins d'inventaire



XCaliber
articulé de cheville

XCaliber
méta-diaphysaire



XCALIBER ARTICULÉ DE CHEVILLE



Têtes articulées et corps télescopique pour une meilleure réduction anatomique. Compresseur/distracteur.



Guide fiche radio-transparent pour cheville permettant la visualisation de l'axe de rotation de l'articulation tibio-tarsienne et un positionnement correct des fiches.



Excellente stabilité et possibilité de mobiliser l'articulation avec la tête articulée radio-transparente pour cheville.



Blocage/déblocage par excentrique. Des deux côtés à l'aide d'une clé.



Angulation des têtes multi-directionnelle des têtes jusqu'à 22 degrés.

XCALIBER META-DIAPHYSEAL



Nombreuses possibilités de positions des fiches avec la même mâchoire.

Fixation stable (même sur des segments osseux courts) obtenue grâce à la position convergente et/ou triangulaire des fiches.




Porte fiche et barre radio-transparente supplémentaires disponibles pour une mise en place polyvalente des fiches (non inclus dans le kit).



Corps du fixateur télescopique pour la réduction de la fracture.



Compresseur/Distracteur dynamique pour une dynamisation précoce du cal.

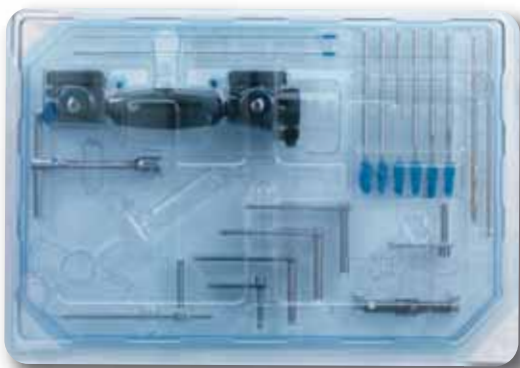

99-91600UE Kit complet XCaliber méta-diaphysaire, stérile

N° de réf.	Description	Quantité
91150	Poignée en T universelle	1
91017	Clé universelle XCaliber	1
11106	Guide mèche Ø 3,2 mm, L 40 mm	1
11104	Guide mèche Ø 4,8 mm, L 40 mm	1
91000	Fixateur XCaliber méta-diaphysaire	1
11102	Guides fiche L 60 mm	3
91015	Compresseur/distracteur dynamique	1
99-611560	Fiche XCaliber Osteotite stérile 150/60 mm	1
99-611550	Fiche XCaliber Osteotite stérile 150/50 mm	1
99-611540	Fiche XCaliber Osteotite stérile 150/40 mm	1
99-611530	Fiche XCaliber Osteotite stérile 150/30 mm	3
1101101	Mèche canulée Ø 3,2 mm, L 200 mm	1
11014	XBroches X-Wire sans olive Ø 1,5 mm L 250 mm	2
1100101	Mèche 4.8x180 mm	1

99-91647UE Kit complet XCaliber pour cheville, stérile

N° de réf.	Description	Quantité
91150	Poignée en T Universelle	1
91017	Clé universelle XCaliber	1
11106	Guide mèche Ø 3,2 mm, L 40 mm	1
11104	Guide mèche Ø 4,8 mm, L 40 mm	1
91047	Fixateur XCaliber de cheville	1
11947	Guide fiche radiotransparent pour cheville	1
11102	Guides fiche L 60 mm	3
91015	Compresseur/distracteur dynamique	1
99-611540	Fiches XCaliber Osteotite stériles 150/40 mm	2
99-611530	Fiches XCaliber Osteotite stériles 150/30 mm	3
1101101	Mèche canulée Ø 3,2 mm, L 200 mm	1
11014	Broches X-Wire sans olive Ø 1,5 mm L 250 mm	2
1100101	Mèche Ø 4,8 mm L 180 mm	1

Étude de cas XCaliber pour cheville

Homme, 26 ans, fracture du pilon tibial type C3 (Classification AO)



Vue pré-opératoire

Vue post-opératoire

Vue de suivi à 4 mois

Vue de suivi à 6 mois après ablation du fixateur

Contributeur: Dr. F. Lavini, Institute of Clinical Orthopaedics and Traumatology (Prof. P. Bartolozzi), University of Verona, Italy.

ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italy

Telephone +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380



Deformity Correction | Trauma | Pediatrics | Bone Growth Stimulation

www.orthofix.com
XC-0903-PL-F1 AA 02/12

Votre Distributeur:
Orthofix SA
1, Rue du Président Wilson
94250 Gentilly
Téléphone: 00 33 (0)1 41 98 33 33
Télécopie: 00 33 (0)1 41 98 33 44

